

KORSCH




XT 600

HOCHLEISTUNGS-
DOPPELRUND-
LAUFPRESSE

XT 600

Leistungsstark, zuverlässig und optimal für große Chargen

Die XT 600 produziert im 24/7-Hochleistungsbetrieb Einschicht- oder Zweischichttabletten. Mit einer Vor- und Hauptpresskraft von 60 kN oder 100 kN, einer maximalen Rotordrehzahl von 100 U/min und einer verlängerten Füllstrecke erreicht die XT 600 eine maximale Leistung von über 1.000.000 Tabletten pro Stunde. Der Wechselrotor erlaubt den schnellen Wechsel von Tablettenformaten und sorgt somit für stets maximale Produktionsleistung und Anlagenverfügbarkeit.

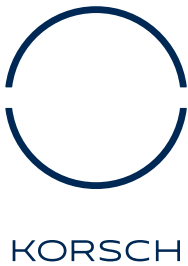

Intuitives Smart-Touch-HMI

Das hochmoderne Steuerungskonzept bietet ein intuitives Interface, das durch umfassende On-Board-Hilfe und eine Vielzahl von Multimedia-Dateien bei der Bedienung, Wartung und Fehlerbehebung unterstützt.

Im Kern arbeitet eine vollständig integrierte SIEMENS-Steuerung, die SPS und Motion Control in einem System vereint. Die offene Struktur, mit der Daten uneingeschränkt bereitgestellt werden können, ist der Schlüssel zur Industrie 4.0. Darüber hinaus ermöglicht sie einen umfangreichen Diagnose-Support - natürlich auch aus der Ferne.

PharmaControl® – Die Presskraftregelung

Die XT 600 verwendet unsere etablierte PharmaControl®-Presskraftregelung zur Überwachung von Presskräften und zur genauen Kontrolle des Tablettengewichts. Das Smart-Touch-HMI zeigt dabei die Mittel- und Einzelwerte der Presskraft an jeder Stempelstation in Echtzeit an.

Die optionale Tabletten-Einzelsortierung schleust zuverlässig schlechte Tabletten über den gesamten Drehzahlbereich aus. Informationen über aussortierte Tabletten werden im elektronischen Chargenprotokoll dokumentiert und können jederzeit eingesehen werden.



Geräusch- und vibrationsarm durch patentiertes Design

Die Kombination aus Druckrollenstation und schwingungsisolierter Trägerplatte verhindert Vibrationen des Kopfstücks und Maschinensockels. Die Lärmemission wird auf < 80 dB(A) herabgesetzt, und es werden keine Vibrationen auf die einzelnen Systemkomponenten oder das Gebäude übertragen.

Containment-Lösungen

Als Systemanbieter bietet KORSCH maßgeschneiderte, vollständig integrierte Containment-Lösungen an, einschließlich benötigter Peripheriegeräte, zentraler Unterdruckregelung und Staubabsaugung. Die Koordination der Schnittstellen zur Gebäudetechnik (z. B. Raum-/Abluft), Materialbeschickung und zu Handlingsystemen übernimmt KORSCH ebenfalls.



DryCon®-Ausführung

- OEB-3/4
- Kontaminationsfreier Zugang zum Pressraum durch ergonomisch platzierte Handschuheingriffe und RTP
- Unterdrucküberwachung und integrierte Handabsaugung zur Trockenreinigung
- KORSCH-Misting zur Benetzung von verschmutzten Oberflächen mit Reinwasser
- Keine PSA während der Produktion notwendig
- Messung der Partikelkonzentration gemäß SMEPAC-Richtlinie für die Zertifizierung des Containment-Levels



Maschinensockel und Multifunktionssäule kontaminierungsfrei



Sauberes und transparentes Designkonzept




Beste Zugänglichkeit für einfachste Reinigung



Flexible Systemlayouts

Doppelrundlaufpresse für
maximale Produktionsleistung

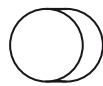

Die XT 600 kombiniert Elemente der bewährten KORSCH-Technologie in einem robusten, modularen und kosteneffizienten Design. Die maximale Leistung von 1.380.000 Einschichttabletten pro Stunde als Doppelrundlaufpresse setzt bei der Verarbeitung großer Chargen neue Maßstäbe und macht die XT 600 zur idealen Lösung für die vollautomatische Massenproduktion. Über die lange Füllstrecke des Füllschuhs wird das Tablettengewicht auch bei hohen Drehzahlen präzise kontrolliert. Die optionalen Druckhalteschienen zwischen den Vor- und Hauptdruckrollen verlängern die Druckhaltezeit und sorgen bei druckhaltezeitsensiblen Produkten für den entscheidenden Vorteil.



Leistungsstark
und zuverlässig



Füllschuh mit langer
Füllstrecke




Optionale Druck-
halteschienen



Drucksäulen mit
robustem Design

Umrüstung auf
Zweischichtproduktion

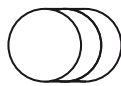

Die XT 600 ist flexibel einsetzbar und produziert maximal 1.380.000 Einschichttabletten oder 414.000 Zweischichttabletten pro Stunde. Ein Zweischicht-Umrüstsatz, der die Komponenten für die Gewichtsregelung der einzelnen Schichten, den Musterzug der ersten Schicht und die vollständige Trennung der Produktschichten enthält, kann jederzeit für die Maschine nachgerüstet werden.



Industrie 4.0 kompatibel



Frei zugängliche Daten



Matrizen oder Segmente



Kosten- und
platzsparend

Technische Daten XT 600

Beschreibung		Rotor mit Matrizen			
Stempelstationen	Anzahl	85	77	65	53
Presswerkzeug	EU/TSM	2/2	2/2	2/2	2/2
Hauptpresskraft	kN	BBS	BB	B	D
Vorpresskraft	kN	60/100	60/100	60/100	60/100
Anpresskraft	kN	60/100	60/100	60/100	60/100
Tablettendurchmesser max.	mm	30	30	30	30
Fülltiefe max., 1. Schicht	mm	11	13	16	25
Fülltiefe max., 2. Schicht	mm	18	18	18	22
Rotordrehzahl, 1-Schicht	U/min	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 80
Rotordrehzahl, 2-Schicht	U/min	10 - 60	10 - 60	10 - 60	10 - 60
Tablettenausstoß max., 1-Schicht	Tab./h	1.020.000	924.000	780.000	508.800
Tablettenausstoß max., 2-Schicht	Tab./h	306.000	277.200	234.000	190.800
Teilkreisdurchmesser	mm	740	740	740	740
Tablettendicke max.	mm	8,5	8,5	8,5	8,5
Nettogewicht Maschine	kg	6.500	6.500	6.500	6.500
Maschinenabmessungen	L x B x H	1.890 x 1.590 x 2.000 mm identisch für alle Versionen			
Gesamtanschlussleistung	kVA	35	35	35	35
Mittlerer Leistungsverbrauch	kW	12 - 22	12 - 22	12 - 22	12 - 22


Beschreibung		Rotor mit Segmenten			
Stempelstationen	Anzahl	115	85	65	
Presswerkzeug	EU/TSM	2/2	2/2	2/2	
Hauptpresskraft	kN	D12	B	D	
Vorpresskraft	kN	60/100	60/100	60/100	
Anpresskraft	kN	60/100	60/100	60/100	
Tablettendurchmesser max.	mm	30	30	30	
Fülltiefe max., 1. Schicht	mm	11	16	25	
Fülltiefe max., 2. Schicht	mm	18	18	22	
Rotordrehzahl, 1-Schicht	U/min	10 - 100	10 - 100	10 - 80	
Rotordrehzahl, 2-Schicht	U/min	10 - 60	10 - 60	10 - 60	
Tablettenausstoß max., 1-Schicht	Tab./h	1.380.000	1.020.000	624.000	
Tablettenausstoß max., 2-Schicht	Tab./h	414.000	306.000	234.000	
Teilkreisdurchmesser	mm	740	740	740	
Tablettendicke max.	mm	8,5	8,5	8,5	
Nettogewicht Maschine	kg	6.500	6.500	6.500	
Maschinenabmessungen	L x B x H	1.890 x 1.590 x 2.000 mm identisch für alle Versionen			
Gesamtanschlussleistung	kVA	35	35	35	
Mittlerer Leistungsverbrauch	kW	12 - 22	12 - 22	12 - 22	

Technische Änderungen vorbehalten

KORSCH Tablettenpressen erfüllen alle grundlegenden Anforderungen der Maschinen-, ATEX-, EMV- und Ökodesign-Richtlinie sowie die aktuellen GMP- und FDA-Vorgaben. KORSCH Tablettenpressen werden mit CE-Kennzeichnung geliefert und erfüllen die Anforderungen von 21 CFR Part 11.

Zur Maschine gehörende Peripheriegeräte erfüllen diese Vorschriften ebenfalls.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten stellen optimale Parameter dar und sind abhängig von Produktqualität und Maschineneinstellungen. Die maximale Presskraft variiert je nach Tabletten-/Stempelgröße und Ausstoßleistung; die maximale Leistung je nach Material, Tabletten-/Stempelgröße und Presskraft. Der mittlere elektrische Leistungsverbrauch ist abhängig von den Produktionsparametern.

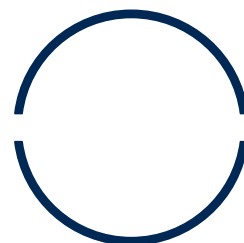

KORSCH

Focused on Tablets, Driven by Innovation

Spezialisierung macht den Unterschied: Seit über 100 Jahren konzentrieren wir uns auf das, was wir lieben und am besten können: das Tablettieren!

Erfahrung ist der Schlüssel: Tausende erfolgreich umgesetzte Projekte sind die Basis für das größte und innovativste Produktportfolio der Branche.

Wir haben die perfekte Lösung und das Knowhow für die unterschiedlichsten Anforderungen: von Spezialpressen für F&E über Rundlaufpressen für den Scale-Up-Betrieb und die Produktion mittlerer Chargen bis hin zu Hochleistungspressen für den 24-Stunden-Betrieb.

Unsere Tablettenpressen sind täglich weltweit erfolgreich im Einsatz, unterstützt durch ein globales Team aus Fachleuten für Service, Prozessoptimierung und Vertrieb.

www.korsch.com

KORSCH weltweit Service-Netzwerk

Europa
Nahe Osten
Afrika

Tel.: +49 30 43576-300
service@korsch.de

Amerika

Tel.: +1-800-KORSCH-1
service@korschamerica.com

Ostasien
Südostasien

Tel.: +49 30 43576-300
service@korsch.de

Südostasien

Tel.: +91 98 19004298
service@korschindia.com